

DODECON

nanotechnology GmbH

DODECON nanotechnology GmbH

Leipzigerstr. 13

D-71111 Waldenbuch, Germany


Tel.: +49-(0)711 6891789

Fax: +49-(0)7157 533452

E-mail: info@dodecon.de

www.dodecon.de

液氮低温台

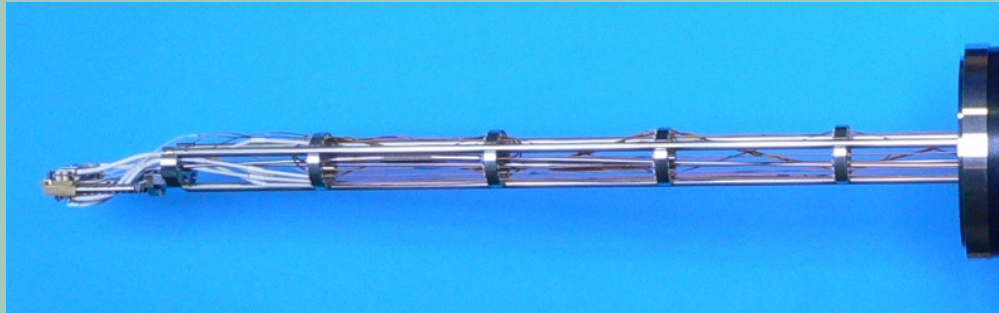

价格低

适应 80 K 以上温度应用

长度根据用户要求设计

价格低廉的液氮轴向流冷却器可适应 80 K 以上温度使用。低温恒温器末端带有热交换器，和液氮输入和输出钢管连接。低温管路由一个坚固框架支撑；所有电线、热电丝也固定在支架内部。紧凑的设计不但保证实现多功能，也保证快速冷却。

- 装在可旋转的 DN65 法兰上；可提供不同型号的法兰。
- 含有热电偶温度传感器和外接头。
- 可定制其它多芯电源外接头。
- 可定制长度达到 600 mm 的低温管路。
- 冷却速率可达 20 K/min。
- 最低温度达 80 K (在铜块处)。
- 适用于超高真空使用，可达 10^{-11} mbar。
- 烘烤温度可达 200 。
- 如需轴向旋转，可通过一个分子泵旁抽。
- 铜质热交换器可以定制。

